
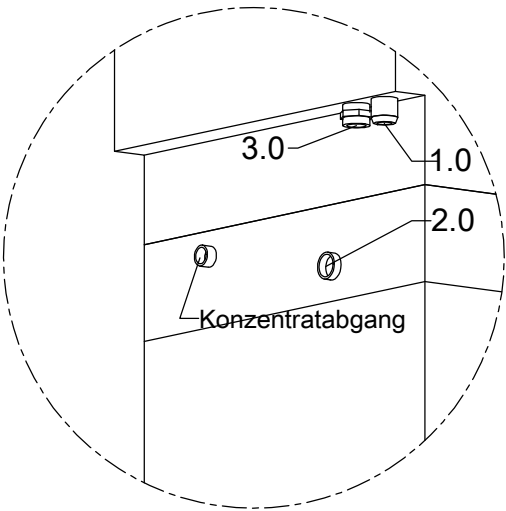
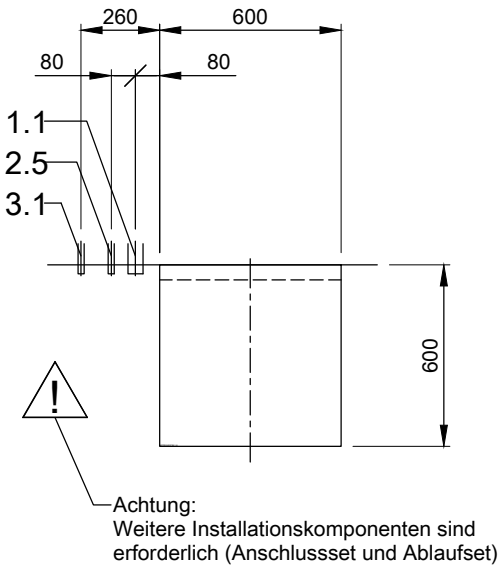
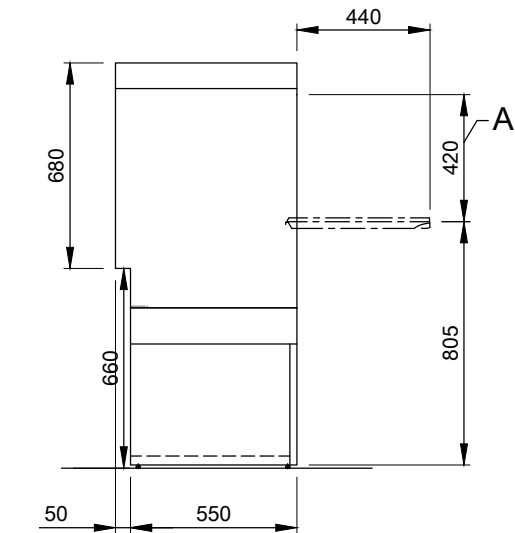


1.0	Maschinenanschluss: Ablauf-Anschlussleitung, DN 22 Schlauch intern in der Maschine als Siphon verlegt
1.1	Ablauf (max. 300 mm ab Oberkante Fertigfußboden), DN 50
2.0	Maschinenanschluss: Frischwasserzuleitung, G 3/4"
2.5	Kaltwasser 10°C, 20 DN, G 3/4 a Durchflussmenge: gesamt 4,3 l/min (bei 15 °C Zulauftemperatur und 200 kPa / 2 bar Fließdruck) elektrische Leitfähigkeit < 1000 µS/cm Mindestfließdruck: 100 kPa / 1,0 bar vor dem Magnetventil Maximaldruck: 500 kPa / 5,0 bar vor dem Druckminderer Abstellhahn und Feinfilter ≤ 25 µm
3.0	Maschinenanschluss: Elektro Anschlussleitung 5G 4,0mm²
3.1	El. Zuleitung zur Maschine: 3N PE 400V ~ 50Hz Nominalstrom / - Leistung: 19,6 A / 12,4 kW Absicherung: 25 A ⚡ Potentialausgleichsleitung
6.0	Wärmebelastung des Spülraumes
6.1	bei 6 Programmabläufen/h: gesamt 0,6 kW, sensibel 0,4 kW, latent 0,2 kW
Anschlussleitung(en) ab Ausgang Maschine 1,4 m	
Die Lage der Anschlussleitungen ist auch spiegelgleich möglich!	
Maschinenausstattung	
Thermische Desinfektion	
(A) Einschubhöhe	
Klarspülerleitung und Sauglanze mit Leerstandsanzeige (blauer Anschluss)	
Reinigerleitung und Sauglanze mit Leerstandsanzeige	
GiO-MODUL (Sockel, 120 mm)	
A0-60	
Rückwandverkleidung	
⚠	Installationshinweise im Zusatzdokument MP_T-INFO-GIO_DE.pdf, bitte beachten!

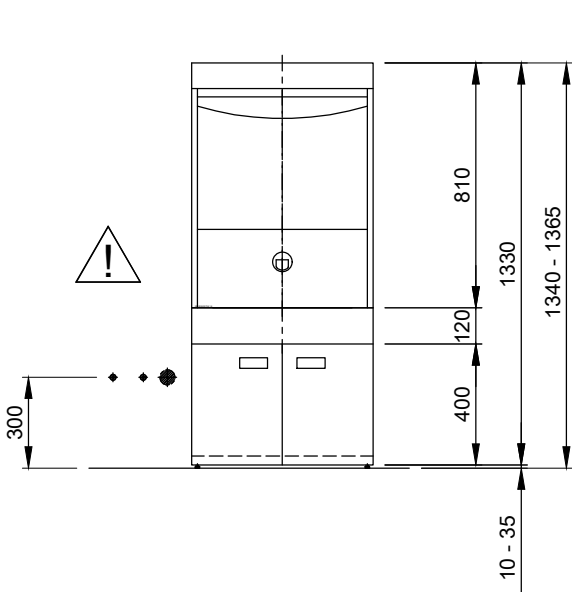

		Änderung			
		MASCHINENBAU GMBH & CO.KG. ENGLERSTR.3 77652 OFFENBURG GERMANY TEL. 0781/2030 TELEFAX 0781/2031303 E-MAIL: m-iplan@meiko-global.com		Betreff: TOPCLEAN MASSBLATT / DEU	
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder zur Kenntnisnahme an Dritte weitergegeben bzw. kopiert noch zu Wettbewerbszwecken verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten ! Änderungen bedingt durch den technischen Fortschritt vor- behalten. Diese Zeichnung wurde automatisiert erstellt und unterliegt nicht dem Prüf- und Freigabeprozess, sowie dem Änderungsdienst. <u>Bitte beachten:</u> Dieses Dokument ist nur gültig im Zusammenhang mit den im Zusatzblatt "wichtige Hinweise" definierten Bedingungen! Diese können beim Hersteller angefordert oder im Partner-net heruntergeladen werden.		Zeichn.-Nr.: S00084998		Titel/Typ: TOPCLEAN 60 M2 GIO-MODUL SOCKEL A0-60	
Maßstab 1:25		gezeichnet: 17.07.2020 m-iplan		geprüft: 17.07.2020 m-iplan	
DEU		DE			